


AD 変換機ドライバのインストール (Windows7)

まず、「TriboSoft」と書かれたCDをパソコンに挿入しておいてください。

※TriboSoft インストーラが起動した場合はキャンセルしてください


次に、AD 変換器 USB ケーブルとパソコンを接続してください。

パソコンに接続すると、「正しくインストールされませんでした」と出ます。なので、手動でドライバーをインストールする必要があります。

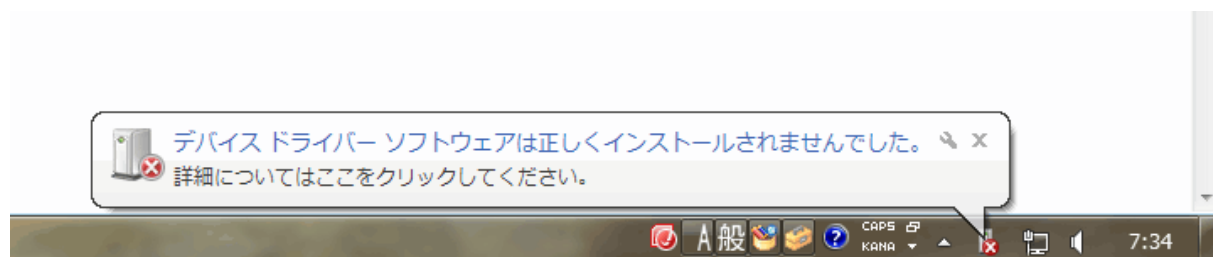


1. 「スタート」→「コンピューター」を右クリックして「プロパティ」→「デバイスマネージャ」でデバイスマネージャを表示します。


すると「ほかのデバイス」に「iSAID-1602/2002」と表示されます。

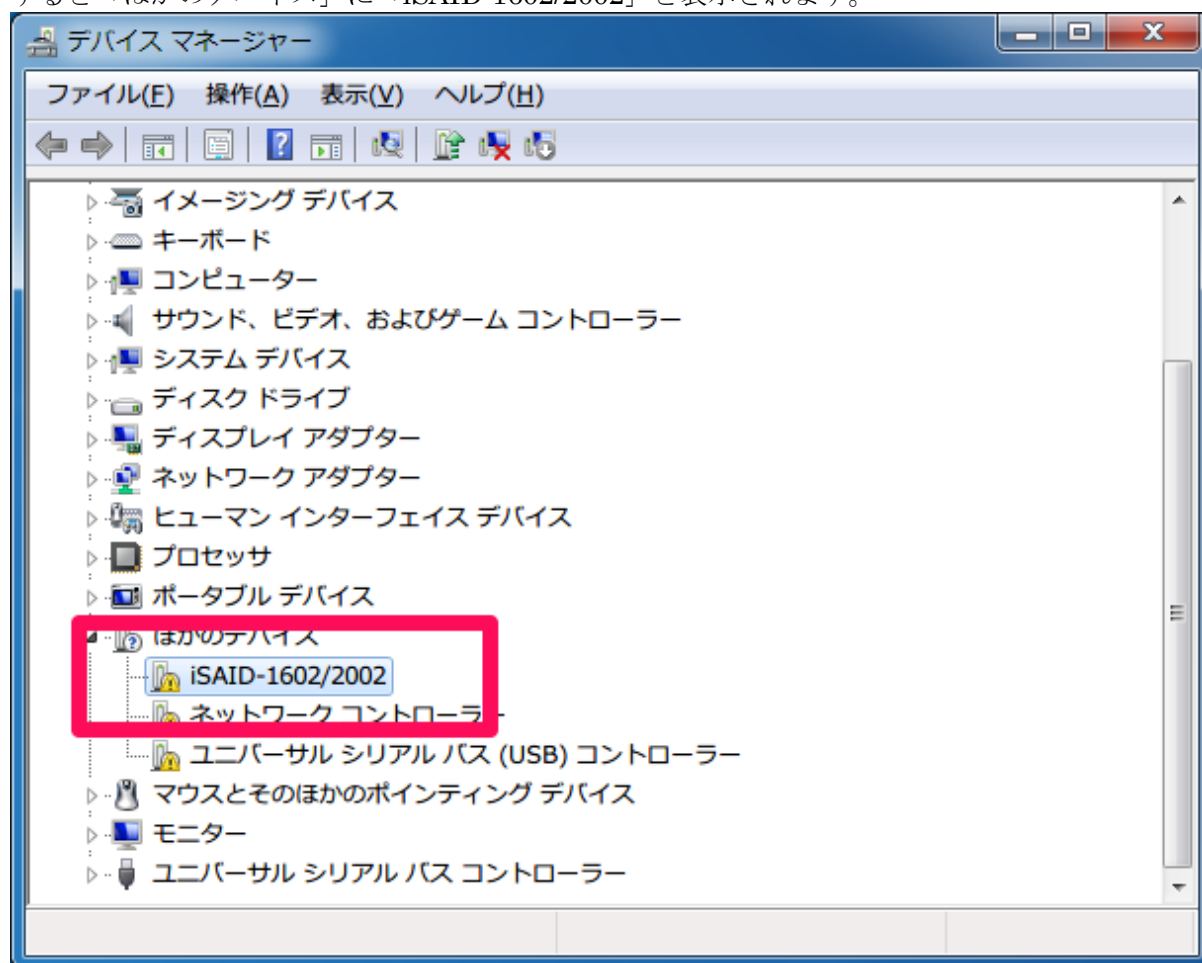


2. 「iSAID-1602/2002」を右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

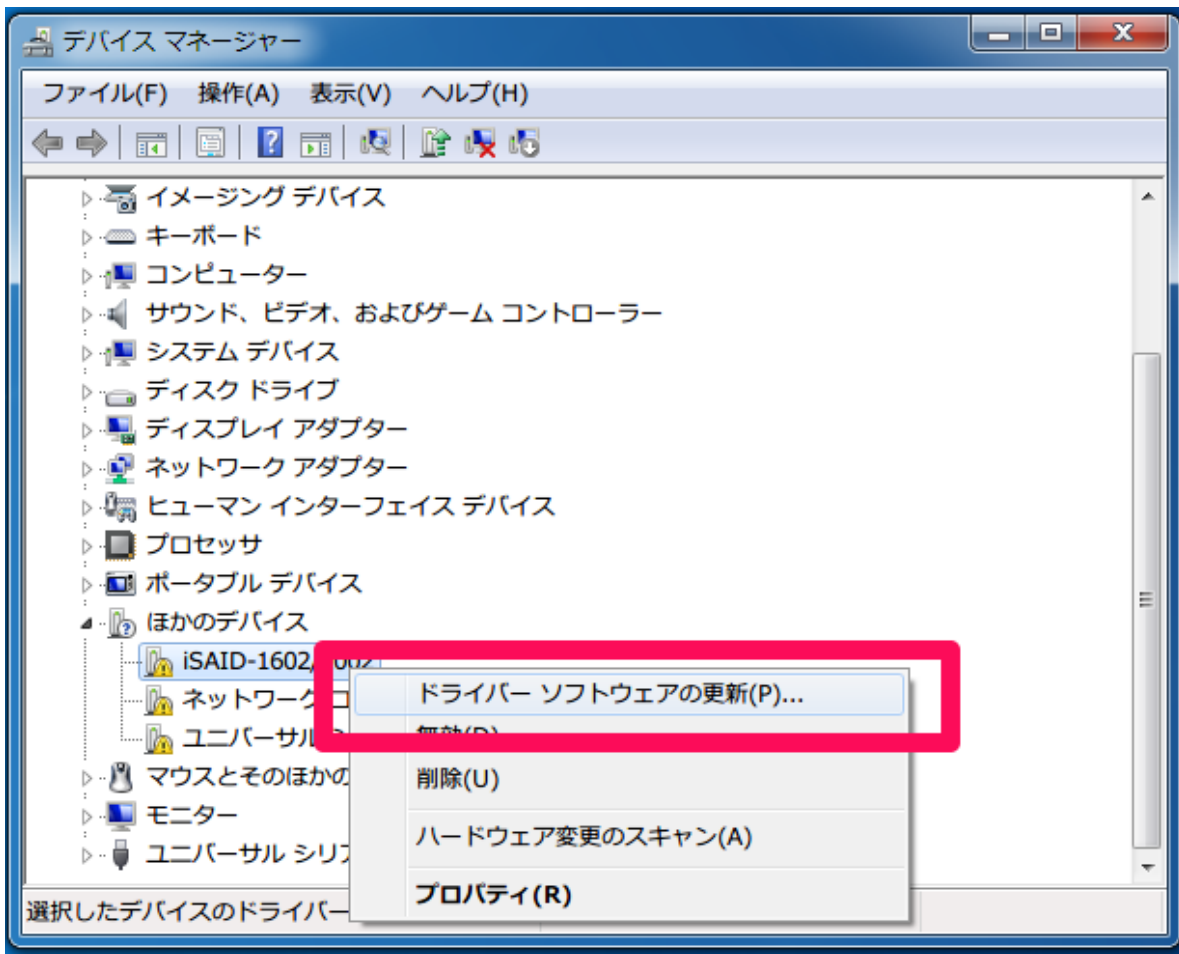

3. コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索しますを選びます。

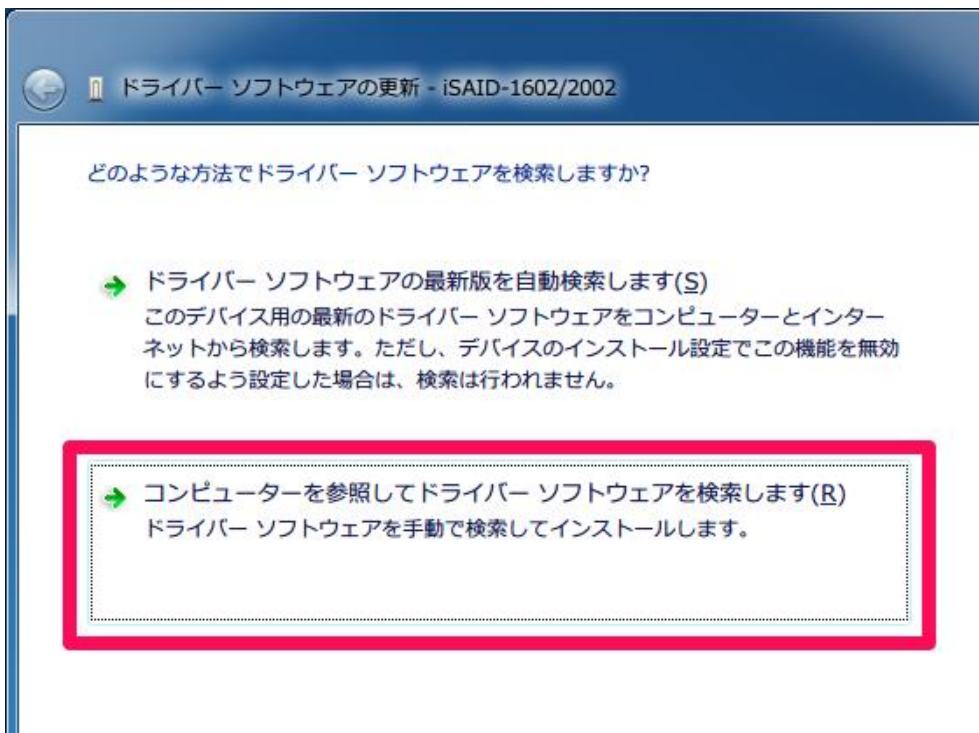


4. CD内のDriverフォルダを指定して「OK」ボタンを押して下さい。


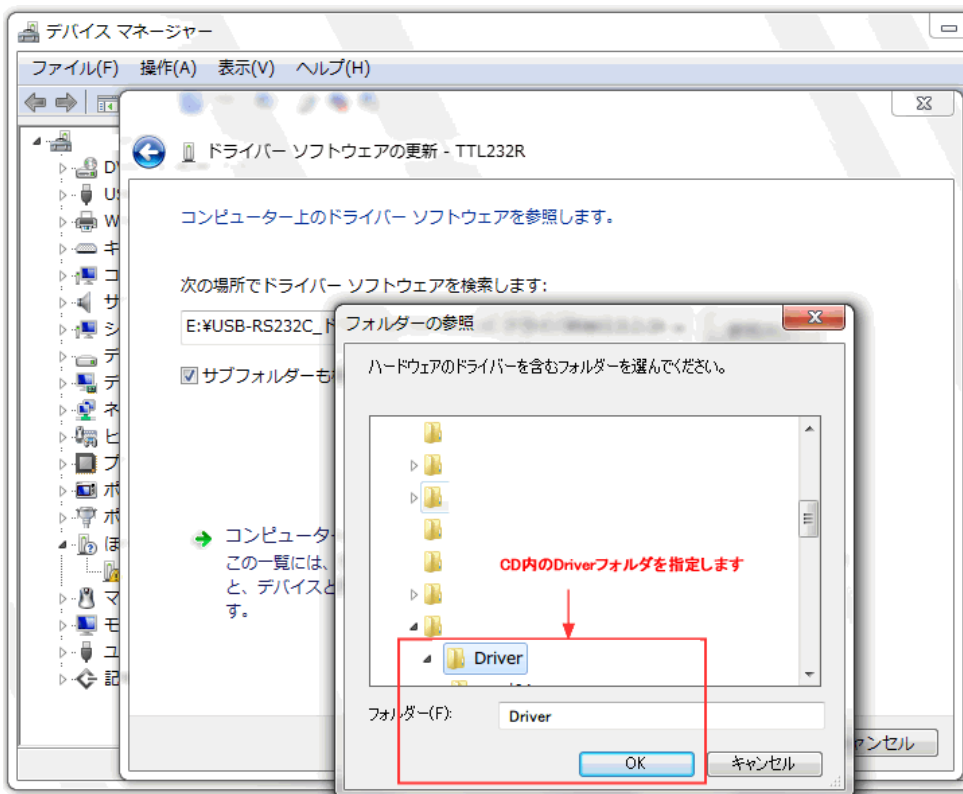


5. ドライバーがインストールされます。

途中に下記 Windows セキュリティダイアログが表示された場合は、「インストール」を選択してください。

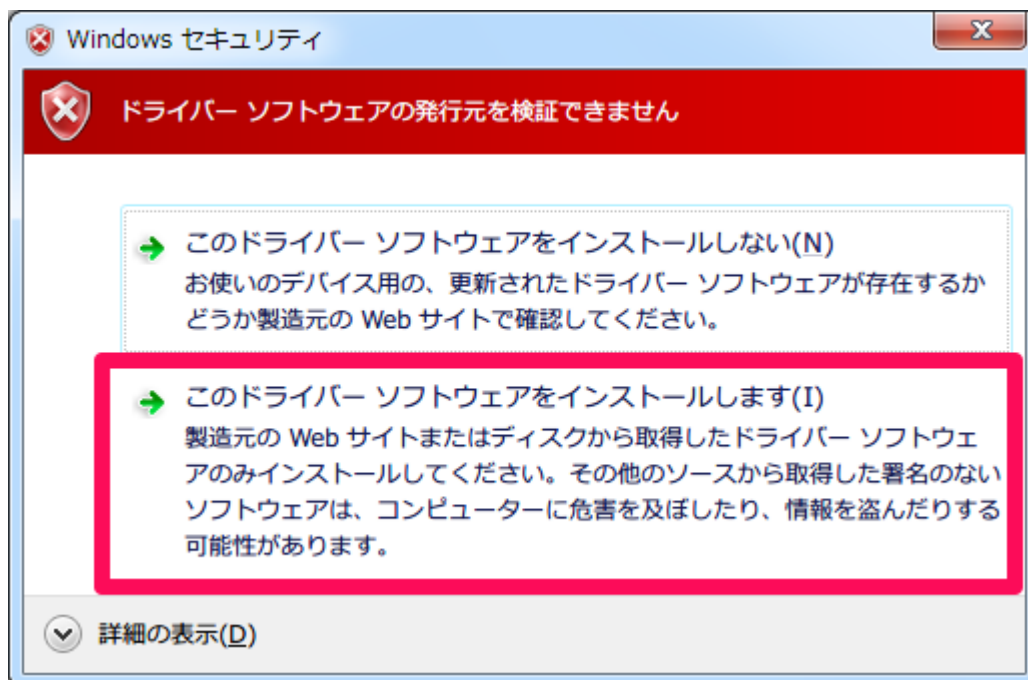

下記「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」が出れば OK です。

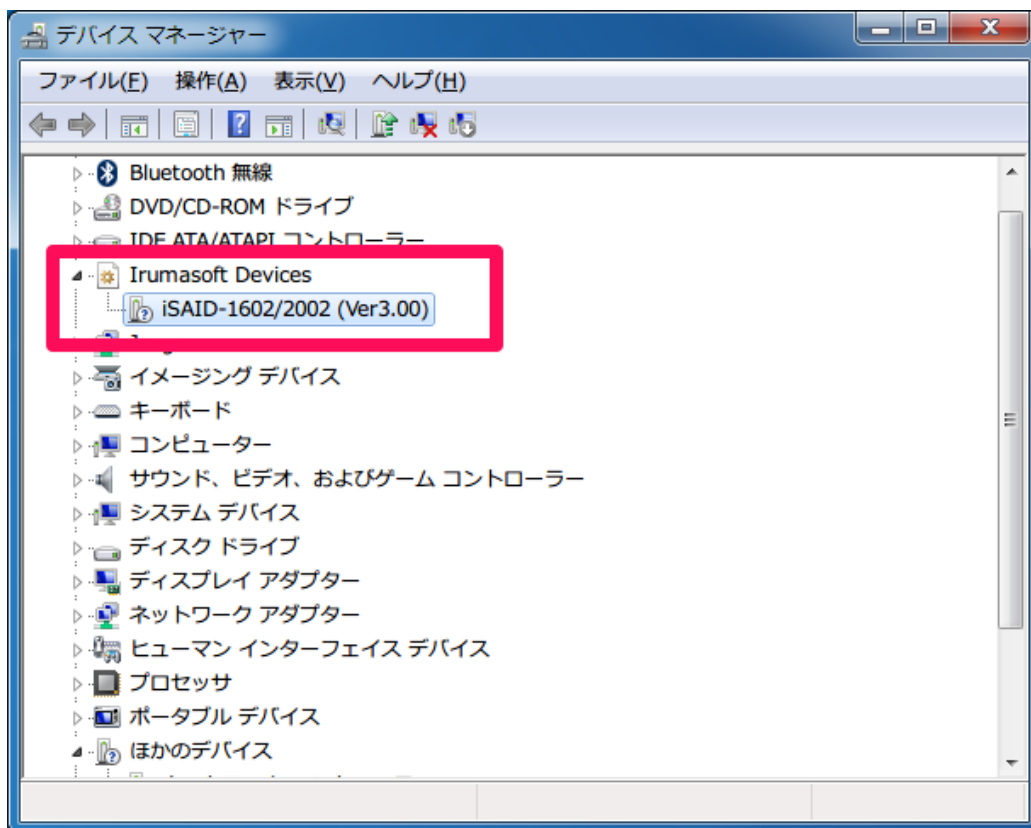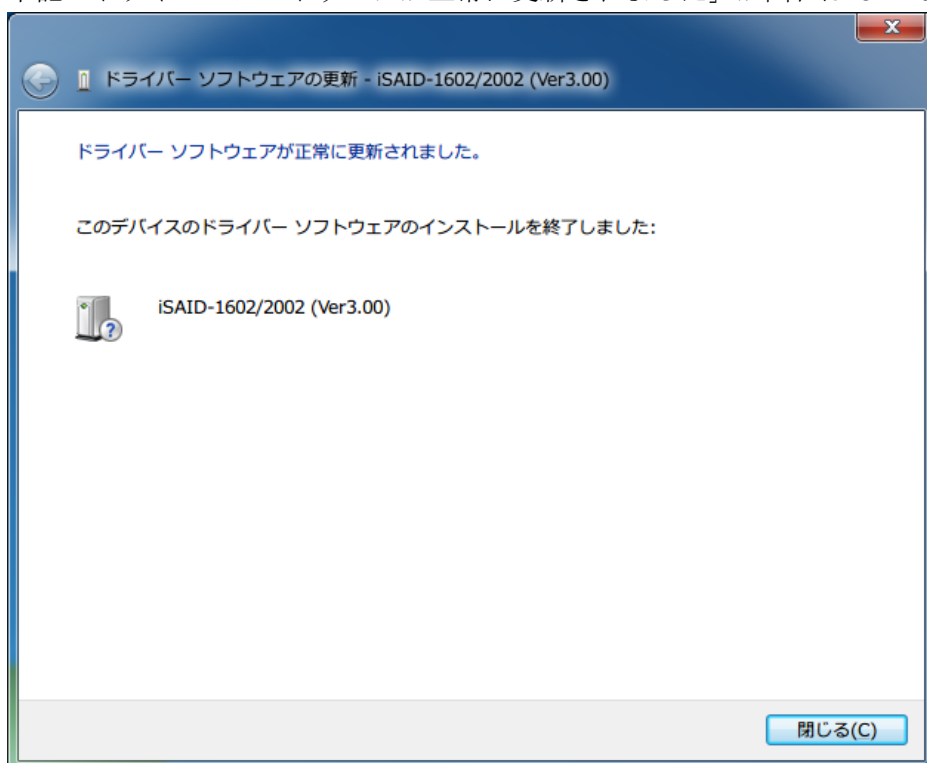

上記のように認識されます。